



**Tương lai của việc
kiểm soát khớp cắn**



OccluSense®

Thiết bị cầm tay Occlusense® là thiết bị di động, được trang bị pin, sử dụng kết nối mạng nội bộ không dây (WiFi) để truyền tín hiệu ghi được tới ứng dụng Occlusense®-iPad.

Thiết bị được tích hợp với đế sạc không dây. Khi sạc đầy pin, thiết bị có thể sử dụng được tới 4 giờ.




Bộ thiết bị Occlusense® bao gồm các bộ phận:

Máy Occlusense® cầm tay, sạc không dây, hộp 25 cảm biến Occlusense® BK 5025, Cảm biến thử nghiệm Occlusense®, 3 pin AAA loại sạc, 1 tờ vít IP6 và hướng dẫn sử dụng

Bộ thiết bị Occlusense® được đặt ở trong vali màu xanh dương

Cảm biến áp lực điện tử của máy Occlusense®

- Độ dày 60 microns
- Linh hoạt khi sử dụng
- Được phủ màu

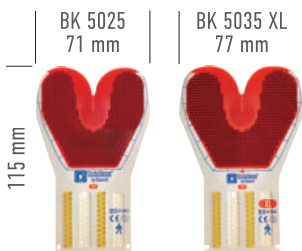

Occlusense® Sensors 25 pieces  BK 5025
Occlusense® Sensors XL 25 pieces  BK 5035



Công nghệ tiên tiến của cảm biến áp lực Occlusense® cho phép ghi lại lực cắn ở 256 mức độ áp lực tử thấp tới cao.


Độ mỏng và dẻo cho phép ghi lại lực khớp cắn ở cả 2 trạng thái động và tĩnh.

Thêm nữa, lớp phủ màu đỏ trên bề mặt cảm biến cho phép đánh dấu điểm tiếp xúc trên răng bệnh nhân.

Trong bộ thiết bị Occlusense® đã có sẵn 25 cảm biến (BK 5025).

**Sử dụng đơn giản như giấy cắn.
Ghi lại lực cắn dễ dàng.**

**Sử dụng Occlusense[®] dễ như việc sử dụng
các sản phẩm kiểm tra khớp cắn thông
thường (giấy cắn). Lực cắn ở cả trạng thái
tĩnh và động đều được ghi lại và lưu trữ trên
ứng dụng Occlusense[®] – iPad**

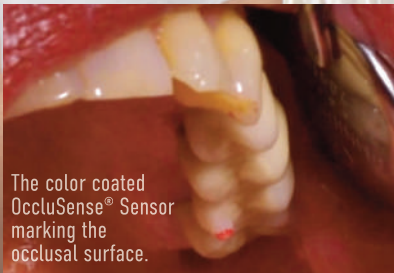

The color coated
OccluSense[®] Sensor
marking the
occlusal surface.

Ứng dụng Occlusense® – iPad app Ghi lại, đánh giá, quản lí, so sánh và trích xuất dữ liệu



Ứng dụng Occlusense® – iPad app là ứng dụng miễn phí được tải về từ cửa hàng AppStore – Apple hoặc tại trang web: www.occlusense.com/install
Supported iPad models: iPad Air 2013, iPad Air 2 2014, iPad Pro 12.9" 2015, iPad Pro 9.7" 2016, iPad (5th gen.) 2017, iPad Pro (2nd gen., 12.9") 2017
iPad Pro (2nd gen., 10.5") 2017, iPad (6th gen.) 2018, iPad Pro (3rd gen., 11") 2018, iPad Pro (3rd gen., 12.9") 2018, iPad Air (3rd gen.) 2019, iPad (7th gen.) 2019

Supported by:



on the basis of a decision
by the German Bundestag



www.occlusense.com

Bausch

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG • Oskar-Schindler-Straße 4 • D-50769 Köln - Germany • Tel: +49-221-70936-0 • Fax: +49-221-70936-66 • info@bauschdental.de

Bausch Articulating Papers, Inc. • 12 Murphy Drive, Unit 4 • Nashua, NH 03062, U.S.A. • Tel: +1-603-883-2155 • Tel: 888-6-BAUSCH • Fax: +1-603-883-0606 • info@bauschdental.com

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd • G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia • Tel: +61-2-9345-1945 • Fax: +61-2-9345-1955 • info@bauschdental.com.au

Bausch Articulating Papers Japan K. K. • 2nd Floor, 1-4-2, Jonan, Ikedashi • Osaka 563-0025, Japan • Tel: +81 72-737-9501 • Fax: +81 72-737-9502 • info@bauschdental.jp

Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda. • Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9 • 13304-240 Itu-SP, Brasil • Tel: +55 11 3020-9263 • vendas@bauschbrasil.com.br

Bausch and OccluSense® are trademarks of Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG, registered in the EU and other countries. Apple, iPad, iPad Air are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.