



Choice of millions of dentists worldwide

 **PACIFIC**  
DENTAL SUPPLY  
*reliable partner*



## AP-B

Dental Scaler & Air Polisher – 2 chức năng trong 1 thiết bị  
Faster Scaling – Nhanh hơn, hiệu quả hơn

## TĂNG TỐC VÀ TỐI ƯU HIỆU QUẢ LẤY VÔI RĂNG

### CẤU TRÚC ĐƯỜNG DẪN ĐƯỢC TỐI ƯU HÓA

Thiết kế khí động học mới  
Giảm thất thoát áp lực dòng chảy  
Loại bỏ mảng bám & sắc tố hiệu quả hơn



Trước khi cạo vôi



Trong khi cạo vôi



Sau khi cạo vôi

## Bột Sodium Bicarbonate cao cấp

-Kích thước hạt trung bình 65 micron, độ cứng thấp hơn men răng: không gây tổn hại bề mặt răng.

-Chiết xuất tinh dầu nguồn gốc thực vật: vị dễ chịu hơn

-Công thức chống ẩm: không gây tắc nghẽn trong khi vận hành

Răng	Thang độ cứng Mohs
Men răng	4-5
Ngà răng	2-2.5
Cementum	2.5

Powder	Thang độ cứng Mohs
Sodium bicarbonate	2.5
Glycine	2
Calcium carbonate	3
Aluminum hydroxide	3



# AP-B

ĐẶC BIỆT VỚI SỐ ĐỒNG

THIẾT KẾ ĐỘT PHÁ

GAM MÀU CANDY ĐẦY CẢM HỨNG

Định nghĩa lại sự khác biệt trong từng chi tiết thiết kế.

The unique Dental Scaler & Air Polisher has arrived  
— nâng tiêu chuẩn vệ sinh răng miệng lên một tầm cao mới.







## CẠO VÔI SIÊU ÂM HIỆU SUẤT CAO

- Loại bỏ mảng bám và vôi răng nhanh chóng
- Tay khoan siêu âm tháo rời – tiệt trùng autoclave dễ dàng
- Tối ưu hiệu quả làm sạch trong mọi tình huống lâm sàng

### CHẾ ĐỘ CHUYỂN ĐỔI TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

-Nhấn tay khoan air-polishing:  
tự động chuyển sang Air Polishing Mode

-Nhấn tay khoan siêu âm:  
tự động kích hoạt Ultrasonic Scaling Mode

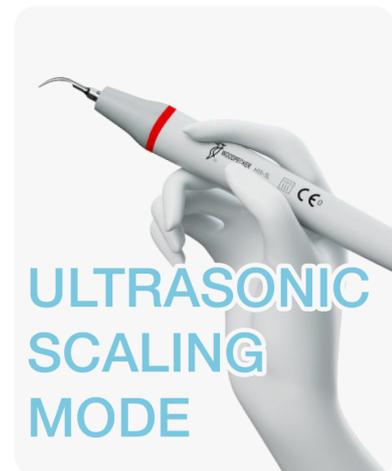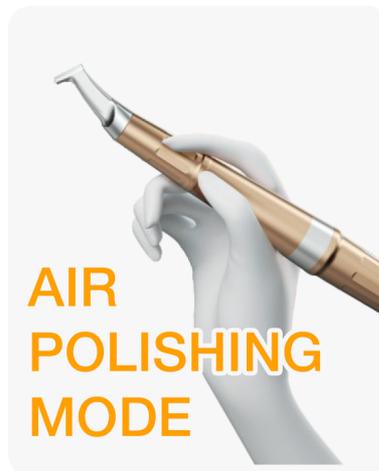

## HAI TRONG MỘT: CHẾ ĐỘ TRÊN NƯỚC & DƯỚI NƯỚC

Thiết kế tay khoan ba phần (Three-section handpiece design)



## THIẾT KẾ CÔNG THÁI HỌC

Bình chứa bột dạng phễu trong suốt 100%  
– dễ quan sát, dễ vận hành

Dòng bột ổn định

Xoay 360°, cho phép quan sát dòng bột trong bình chứa  
theo thời gian thực

Thiết kế nhỏ gọn – trọng lượng nhẹ

Thân máy chỉ nặng 2 kg

Đế máy thiết kế tiết kiệm không gian



Thân máy chính (1 bộ)	Bột bicarbonate 65 $\mu$ m dùng trên nướu (1 lọ)
Bàn đập không dây (1 cái)	Bột glycine 25 $\mu$ m dùng dưới nướu (1 lọ)
Bộ nguồn (kèm dây) (1 bộ)	Đầu phun dưới nướu (10 cái)
Tay khoan siêu âm HW-5L (1 cái)	Dụng cụ tháo đầu phun (1 cái)
Tay phun powder trên nướu AP-1 (1 cái)	Hộp tiệt khuẩn (2 hộp)
Tay phun powder dưới nướu AP-2 (1 cái)	Bình nước 1400 mL (1 cái)
Bộ tip siêu âm đa dụng (1 bộ) P1x2, P3x1, P8x1, G1x1, G4x1	Bình nước hình nón 700 mL (1 cái)
Cờ lê lực #1 (1 cái)	Kim dài & kim ngắn (1 bộ)
Bình chứa bột trên nướu (1 cái)	Khớp nối chữ T (1 cái)
Bình chứa bột dưới nướu (1 cái)	Đầu nối đực & cái (1 cặp)
Đầu nối ống khí (1 cái)	



**Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd.**

Information Industrial Park, Guilin National High-Tech  
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China  
Sales Dept.: +86- 773- 5873196/2350599  
After-sales Service Dept.: 0773- 5827898  
E-mail: woodpecker4@glwoodpecker.com  
Website: <http://www.glwoodpecker.com>  
ZMN-XC-072

Scan and log on to website  
for more information



find us on:



find us on:



find us on:

