

DTE®

Choice of Millions of
Dentists Worldwide



PACIFIC
DENTAL SUPPLY
reliable partner

CHUYÊN GIA CẠO VÔI SIÊU ÂM D600



Scan and log onto the website for more details

D600 LED

Được thiết kế cho điều trị nội nha

Theo dõi tần số thời gian thực

Giám sát tần số rung và tự động điều chỉnh để đảm bảo đầu rung luôn hoạt động ở trạng thái tối ưu nhất.




Công suất đầu ra nhẹ nhàng

Dao động sóng hình sin để tránh kích thích do dòng điện đầu ra tạm thời. Công suất liên tục mang lại trải nghiệm điều trị thoải mái hơn.



Phản hồi suy biến thông minh

Tự động bù công suất theo phản hồi về lực cản mà đầu rung gặp phải, để đạt được hiệu quả điều trị liên tục và ổn định.

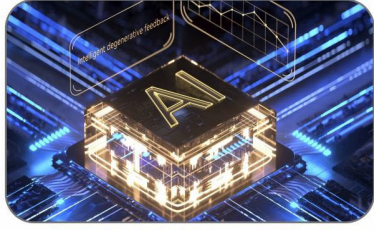

Lấy cao răng

Lấy cao trên nướu

GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD9 GD10

Sửa soạn xoang (người lớn)

SBD1 SBD2 SBD3

SBDL SBDR

Sửa soạn xoang (trẻ em)

SBD4 SBD5 SBD6

SBD7L SBD7R

Loại bỏ mảng bám sinh học

PD21L PD21R PD22L PD22R

Bảo trì Implant

PD40 PD41 PD42 PD43L PD43R

Nha chu

Chăm sóc nha chu

PD1 PD2L PD2R

PD3 PD2LD PD2RD

PD3L PD3R PD4

PD5 PD7 PD10

PD11 PD11D PD12

PD14L PD14R PD18

PD20 PD20L PD20R

Tay khoan tích hợp đèn LED có thể tháo rời

Công nghệ nguyên khối mới nhất.
Nguồn sáng dịu nhẹ cho trường nhìn rõ hơn. Vật liệu công nghệ cao có thể hấp thụ tiết trùng



Hệ thống cấp nước tự động

Bình nước dung tích lớn 600ml có thể chứa nước cất, natri hypoclorit và các dung dịch khác. Thiết kế ống dẫn nước kép cho phép vận hành thuận tiện hơn.




Hệ thống cảm ứng thông minh:

Hệ thống cảm ứng chống nước siêu nhạy cho phép điều chỉnh chế độ dễ dàng. Có 12 mức công suất điều trị nhằm đạt được độ chính xác tối đa.



Nội nha & Phẫu thuật chóp

Phục hình

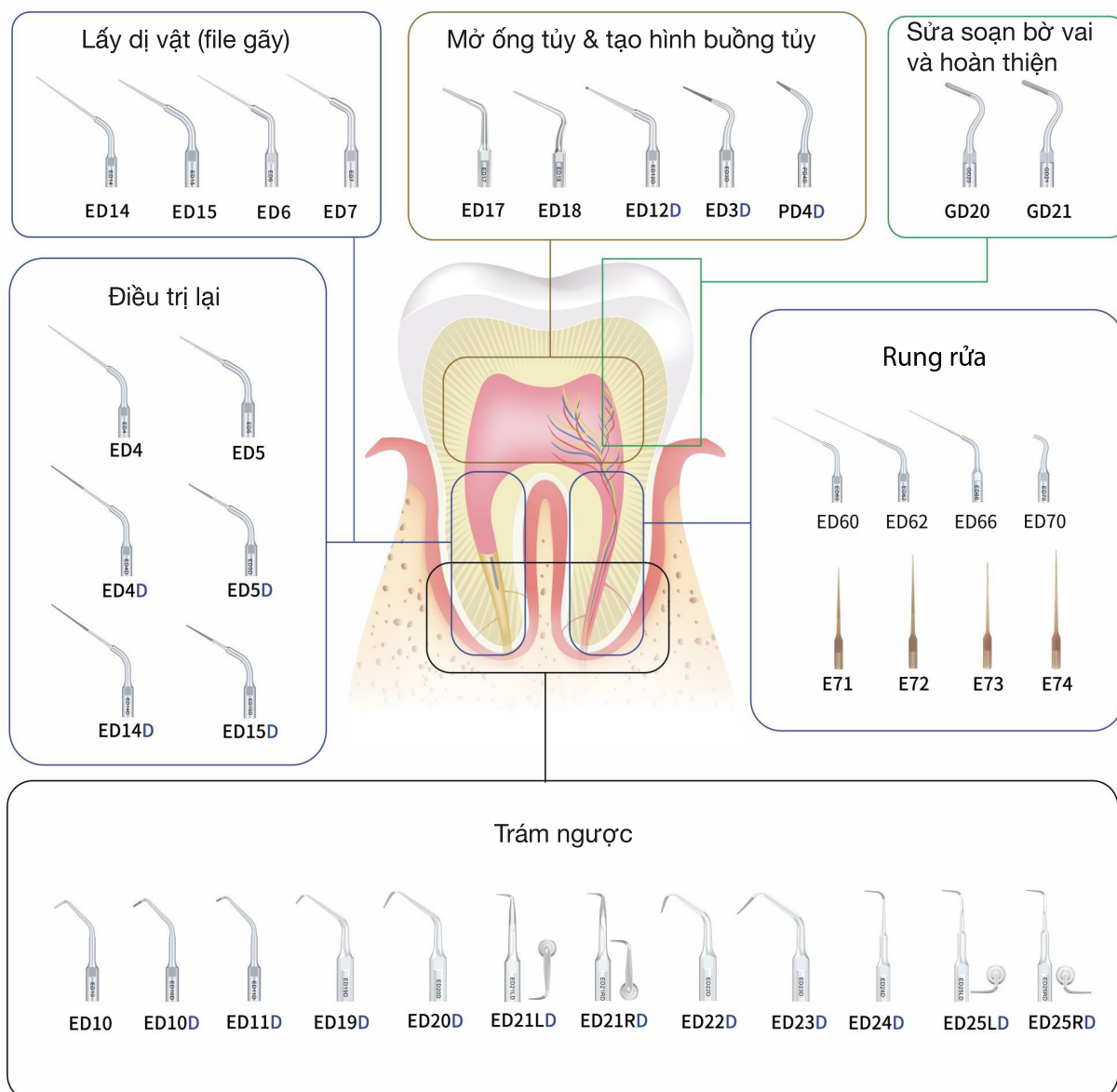

L: Trái

R: Phải


D: Mũi phủ kim cương

Chuyên gia nội nha siêu âm D600:

Chức năng chính: Sửa soạn siêu âm, mở ống tủy, lấy file gãy, rung rửa, điều trị lại.

Các chức năng khác: Lấy cao răng trên nướu, sửa soạn xoang, sửa soạn bờ vai và hoàn thiện, chăm sóc nha chu, bảo trì implant.


Bộ kit chuyên gia nội nha (Endo Master Kit):

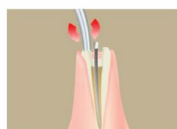


Với khả năng dẫn truyền siêu âm hiệu quả cao và thiết kế đặc biệt, mũi này có thể loại bỏ hiệu quả các phức hình khó tháo bằng kĩ thuật siêu âm.



Mũi đầu bị phủ kim cương dùng để loại bỏ dị vật ra khỏi buồng tủy an toàn, chính xác và mở ống tủy bị vôi hóa một cách hiệu quả.

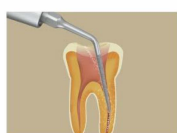

Để loại bỏ các mảnh vụn canxi hóa, chất trám bít kém chất lượng trong buồng tủy. Cũng có thể mở rộng thành ống tủy nơi file bị gãy để dễ dàng lấy ra.

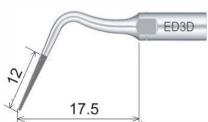

Dùng để loại bỏ chốt sợi, file gãy, mảnh vụn trám bít,... ở 1/3 phần trên của ống tủy.



Mũi cực kỳ mỏng và linh hoạt với khả năng dẫn sóng siêu âm tốt, được sử dụng để loại bỏ dị vật ở 1/3 phần trên của ống tủy (có thể uốn cong).



Mũi cực kỳ mỏng và linh hoạt với khả năng dẫn sóng siêu âm tốt, được sử dụng để loại bỏ dị vật ở 1/3 phần trên của ống tủy (có thể uốn cong).



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R. China
Sales Dept.: +86-773-5873196/2350599
After-sales Service Dept.: 0773-5827898
E-mail: woodpecker4@glwoodpecker.com

EC REP Borkstrasse 10 · 48163 Muenster · Germany
MedNet EC-Rep GmbH



Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương
Văn phòng Hà Nội: Số 4/102, Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tel: 0989.463.345 024.3773.3138
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 13D Phan Chu Trinh, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0909.595.081 028.3911.2170
E-mail: customercare@dentalpacific.com.vn