



Dpex X **MHN**

MÁY THĂM DÒ ỐNG TUỖ VÀ ĐỊNH VỊ CHỚP



Thiết bị định vị chóp chính xác

1

Tăng cường khả năng xác định chiều dài làm việc điện tử của bạn với mạch kỹ thuật số tiên tiến có chip xử lý trung tâm hiện đại nhanh chóng, mô-đun xử lý DSP và các linh kiện điện tử có độ chính xác cao.

Cài đặt mức dừng chóp:
Có thể tùy chỉnh báo động chóp/dừng chóp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của người dùng.



2 mức âm thanh



Cài đặt dừng vùng chóp



Chế độ ngủ



MHN X Máy nội nha

Kết nối Motor nội nha với
Máy định vị chóp

-  Tự động Quay/Dừng
-  Chậm lại khi gặp chóp
-  Đảo ngược chóp




1. De-Deus, et al. Độ chính xác lâm sàng của 3 máy định vị chóp điện tử đa tần số được đánh giá thông qua hình ảnh chụp cắt lớp vi mô, Tạp chí Nội nha, Tập 49, Số 5, 2023, Trang 487-495.

MÀN HÌNH CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỂ CÓ SỰ THOẢI MÁI TỐI ĐA

Nghiêng màn hình từ $+1.8^\circ$ đến 51.8°
và dừng ở góc bạn mong muốn.

Giảm căng thẳng cho cổ và lưng trong quá trình phẫu thuật,
đồng thời tập trung vào độ chính xác tuyệt đối.

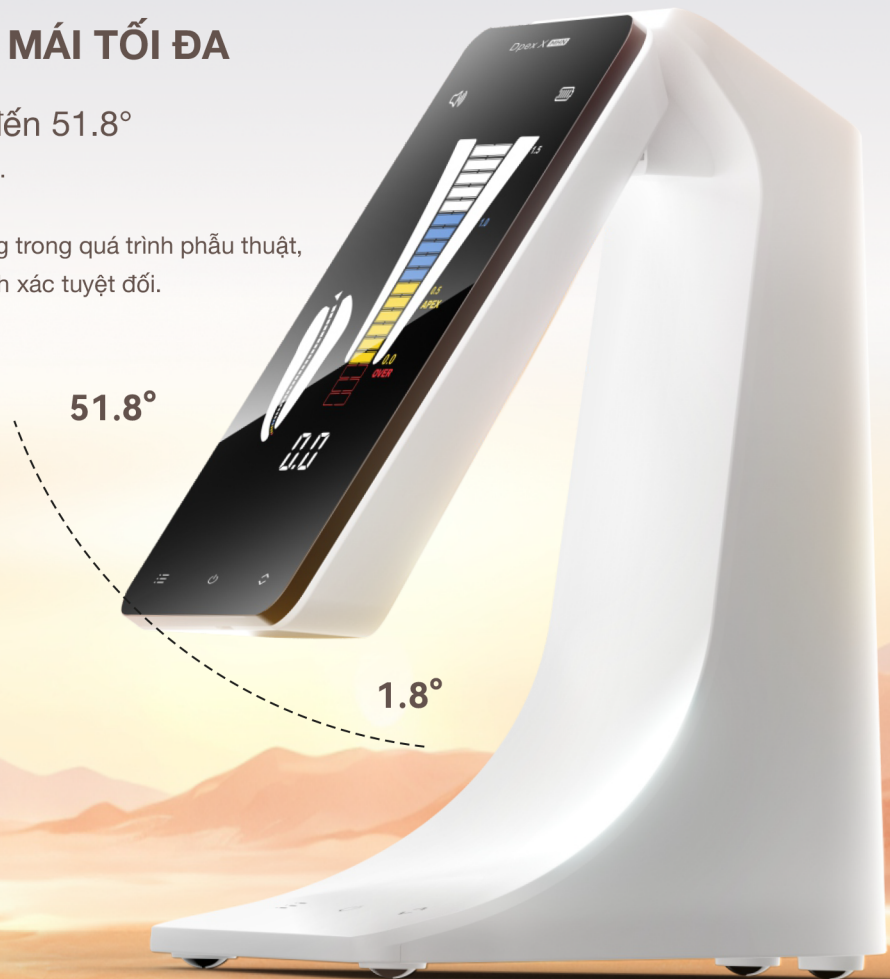

NÚT BẤM 2 VỊ TRÍ, GẤP ĐÔI TIỆN LỢI


Không giống như các máy định vị chóp thông thường, thiết bị của chúng tôi có các nút điều khiển trên cả màn hình và đế, mang lại sự dễ sử dụng và hiệu quả cao hơn. Kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, mọi lúc!



CHẾ ĐỘ MHN LÀ GÌ VÀ TẠI SAO BẠN
NÊN SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ MHN?


Định vị lỗ ống tủy và buồng tủy

Chế độ MHN cho phép xác định vị trí buồng tủy có chọn lọc, ngay cả khi chúng bị canxi hóa một phần và có dạng cấu trúc giống như đĩa, đồng thời giúp tìm ra các lỗ của ống tủy bị vôi hóa.

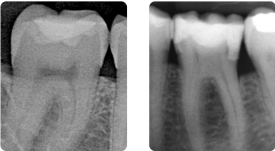

Công nghệ tiên tiến

Chế độ MHN sử dụng phương pháp điện từ tiên tiến để đo giá trị điện dung, giúp tăng đáng kể độ nhạy phát hiện tín hiệu. Khi được kết hợp với kiến thức của người vận hành về hình thái buồng tủy, độ phóng đại, hình ảnh X-quang và CBCT, chế độ MHN trở thành công cụ đắc lực giúp xác định hiệu quả các lối vào ống tủy ẩn.

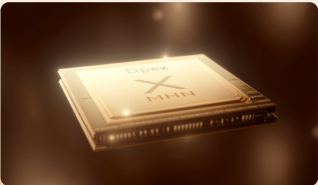


Minimally Invasive
Technique

Bảo tồn ngà răng và giảm nguy cơ thủng sản do mũi khoan mở.

Trọn bộ toàn diện

Bao gồm đầu dò MHN, kẹp file và móc môi.
Đầu dò nội nha MHN đa năng được thiết kế đặc biệt để có hiệu suất tối ưu ở chế độ MHN.

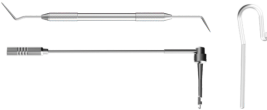

Màn hình LCD 3,8" mặt kính

Với màn hình rõ nét và các chỉ số trực quan, thiết bị này cho phép bạn dễ dàng thực hiện từng bước, đảm bảo độ chính xác và sự tự tin trong suốt quá trình điều trị.

Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương

Văn phòng Hà Nội: Số 4/102, Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tel: 0989.463.345 024.3773.3138

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 13D Phan Chu Trinh, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 0909.595.081 028.3911.2170

E-mail: customer@dentalsupply.com.vn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Màn hình LCD 3.8"

- Thời gian làm việc: 7h

- Thời gian sạc: 3h

- Pin: 3.7V/2000mAh

Cấu hình toàn diện

Không thể hấp sấy tiết trùng

Dây đo x 1 (Kết cấu mềm mại)

Có thể hấp sấy tiết trùng

Kẹp file x 4 (Được phủ bằng gel silica sinh học)

Móc môi x 5 (Được làm bằng thép y tế không gỉ)

Đầu dò file MHN x1



 Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R.China

Sales Dept.: +86-0773-5873196/2350599
After-sales Service Dept.: +86-0773-5827898
E-mail: woodpecker4@glwoodpecker.com
Website: <http://www.glwoodpecker.com>

 MedNet EC-REP C llb GmbH
Borkstrasse 10 · 48163 Muenster · Germany

ZMN-XC-152 V1.0