

***e*CEMENT®**

**Bộ duy nhất cần và đủ cho tất cả phục hình
đặc biệt là phục hình sứ ép lithium disilicate**

5 lý do nên dùng **eCEMENT[®]** ngay hôm nay

1

Tương hợp

với tất cả các loại phục hình: veneer, cầu, mào, phục hình CAD/ CAM nguyên khối và sứ ép.

2

Dễ làm sạch

dễ dàng
lấy đi phần cement dư.

3

Nguyên bộ đầy đủ

các thành phần cần thiết để
gắn phục hình thành công,
đặc biệt là phục hình veneer.

4

Độ dày lớp cement gắn mỏng

đảm bảo phục hình được
khít sát hoàn toàn, đặc
biệt là phục hình veneer.

5

Màu sắc đa dạng

có nhiều màu để lựa chọn, khi
trùng hợp không thay đổi màu
phục hình, mang lại
thẩm mỹ tối ưu.





GIA TĂNG ĐỘ BỀN DÁN KHI GẮN

Thông dụng và linh hoạt

- Tương hợp với tất cả các loại phục hình: veneer, cầu, mào, phục hình CAD/ CAM nguyên khối, sứ ép lithium disilicate.

Dễ dàng lấy đi phần cement dư

- Dễ dàng sử dụng và thao tác.

Độ dày lớp cement mỏng

- Đảm bảo phục hình được khít sát hoàn toàn.

Cement quang trùng hợp nhiều màu để chọn lựa

- Phục hình không bị thay đổi màu sau khi gắn giúp có màu sắc tự nhiên và mang lại thẩm mỹ tối ưu.

Các đặc tính vật lý đặc biệt

- Đảm bảo phục hình chịu được các lực tác động, căng kéo hằng ngày.

Cản quang

- Cho phép đánh giá tốt hơn trên phim X quang.



Bộ hoàn chỉnh với tất cả thành phần cần thiết cho việc gắn thành công mọi phục hình lithium disilicate:

- Đơn giản và tiện lợi, giảm lưu kho cho quá nhiều sản phẩm keo dán và cement.

Độ bền dán tuyệt đối của lực dán sứ lên sườn lithium disilicate (MPa)

Độ bền dán được tạo ra với việc sử dụng phương pháp Ultradent lên ngà răng.

■ Test kiểm soát ■ Test 10,000 chu kỳ nhiệt

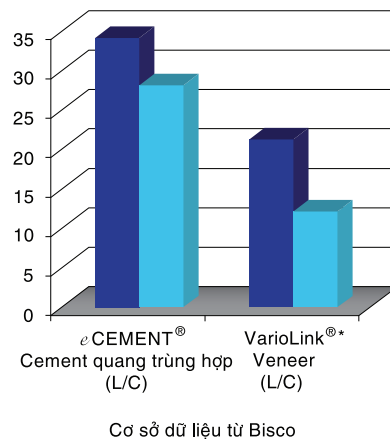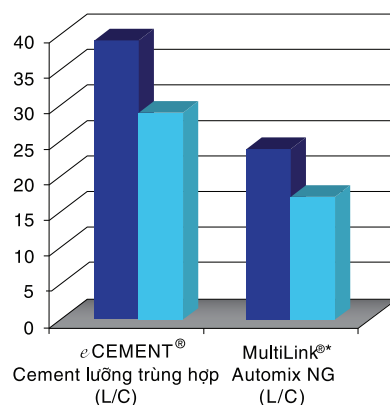

Hình ảnh lâm sàng của Dr. Tyler Lasseigne, DDS, CDT



Bệnh nhân mong muốn cải thiện nụ cười với phục hình veneer sau khi làm dài thân răng.



Phục hình veneer trên mẫu làm việc sẵn sàng để gắn cement.



Phục hình sau cùng sau khi nướu lành thương.

Đây là bộ cement gắn **TẤT CẢ TRONG MỘT** bao gồm sự kết hợp từ các sản phẩm mang tính sáng tạo, đã được kiểm chứng giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Được đánh giá là cement thành công nhất khi gắn cho các phục hình, đặc biệt là phục hình lithium disilicate:

Sản phẩm đạt giải thưởng Công Nghệ và công thức sáng tạo BISCO

Hệ thống eCEMENT cung cấp giải pháp gắn răng đơn giản và bền chặt cho lithium disilicate:

- Veneer
- Cầu răng 3 đơn vị
- Inlay
- Tất cả phục hình nguyên khối CAD/CAM lithium disilicate
- Onlay
- Mão



HỆ THỐNG BAO GỒM:



eCEMENT quang trùng hợp (màu trắng sáng và màu trong) với đặc tính dần mỏng đồng đều giữa răng và phục hình, cement được kích hoạt dễ dàng và hoàn toàn dưới ánh sáng đèn quang trùng hợp với độ dày phục hình khoảng 2mm.



eCEMENT lưỡng trùng hợp dùng cho các loại phục hình với vật liệu mà ánh sáng đèn quang trùng hợp không thể đi xuyên qua.

SELECT HV ETCH

SELECT HV ETCH w/BAC là dung dịch xoi mòn acid phosphorite 35% có độ nhớt cao, được sử dụng để xử lý bề mặt răng trước khi dán.

PORCELAIN ETCHANT

4% PORCELAIN ETCHANT được sử dụng để xử lý bề mặt lithium disilicate và giúp gia tăng độ liên kết giữa sứ và cement resin.

PORCELAIN PRIMER

PORCELAIN PRIMER dùng để xử lý bề mặt sứ lithium disilicate để có được lực dán hiệu quả và gia tăng độ bền dán.

ALL-BOND UNIVERSAL

ALL-BOND UNIVERSAL keo dán đa năng, tạo bề mặt dán hoàn hảo cho cả ngà và men răng, giúp đạt được lực dán tối ưu.