



MOTOR NỘI NHA KHÔNG CHỖI THAN

ĐẦU TIÊN

Bởi Woodpecker

MotoPex


ĐẦU SIÊU NHỎ VÀ CỔ THON
HIỆU NĂNG MẠNH MỀ
XOAY CHÍNH XÁC
KHÔNG ỒN
THIẾT KẾ CÂN BẰNG




GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

MOTOR KHÔNG CHỐI THAN HIỆU SUẤT CAO


- 1- Góc xoay lắc có thể điều chỉnh với khoảng cách mỗi góc là 10°.
Phạm vi điều chỉnh: 20° - 400°.
Độ chính xác của góc xoay giúp giảm nguy cơ gãy dụng cụ và tăng hiệu quả sửa soạn ống tủy.

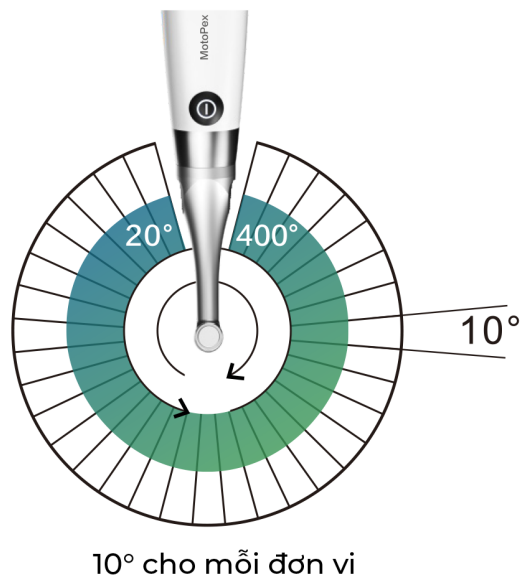

- 2- Xoay mượt mà và không ồn giúp cho việc điều trị mang lại cảm giác dễ chịu cho bệnh nhân.

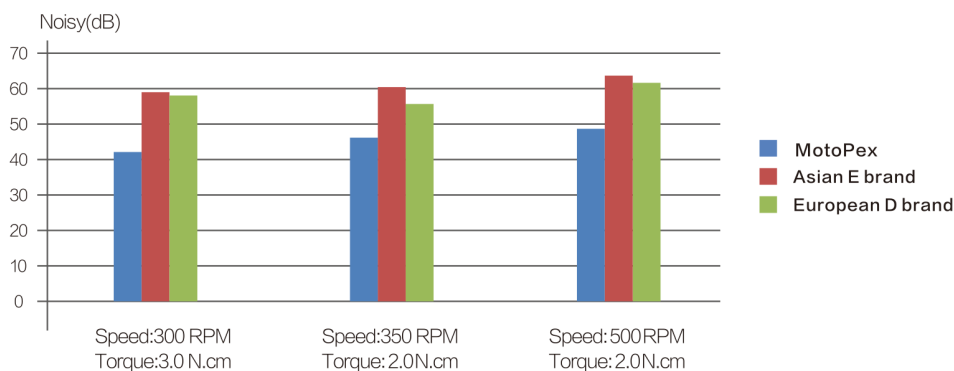

- 3- Hiệu năng mạnh mẽ, kết hợp cùng lực xoay chính xác và ổn định, giúp sửa soạn ống tủy hiệu quả hơn

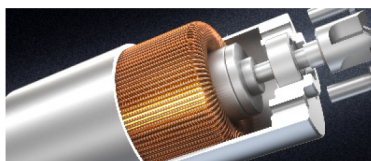

Tuổi thọ phục vụ của Motor:
Motor không chối than = Motor chối than x10




Tương thích với toàn bộ các hệ thống trám chính thống.

Phạm vi tốc độ: 100 - 1800 RPM
Phạm vi lực Torque: 0.4 - 5.0 Ncm
Phạm vi chế độ xoay lắc: 20° - 400°




Tay khoan khuỷu siêu nhỏ

Đầu tay khoan khuỷu siêu nhỏ, đường kính chỉ 8mm và chiều cao chỉ 9,7mm mang lại tầm nhìn rõ ràng trong suốt quá trình phẫu thuật.

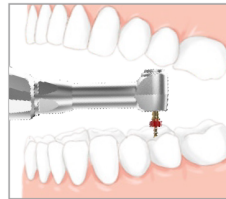



Normal contra angle head & neck

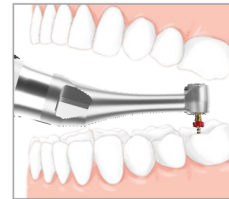

Woodpecker contra angle Super Mini head & Slim neck

Tay khoan khuỷu siêu nhỏ

Việc tích hợp tính năng xác định chiều dài giúp quá trình điều trị nội nha trở nên an toàn và hiệu quả hơn. Hệ thống thực hiện hiển thị thời gian thực vị trí của trâm bên trong ống tủy. Máy sẽ tự động dừng hoặc xoay ngược chiều ngay khi trâm chạm đến điểm dừng chớp nhằm ngăn ngừa tình trạng thủng chóp. Chức năng Tự động Khởi động và Tự động Dừng cho phép mô-tơ tự động vận hành khi trâm đi vào ống tủy và tự động dừng lại khi rút trâm ra ngoài.

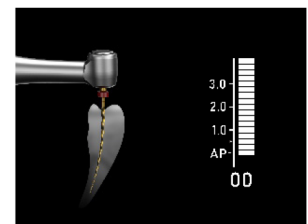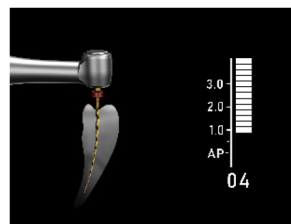

Pin lithium 2000 mAh



Tay khoan khuỷu xoay 360°



Tay khoan khuỷu 6:1



Trọng tâm hướng xuống phía trước





Sự lựa chọn của hàng triệu nha sĩ trên toàn thế giới



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd.

Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R.China

Tel: +86-773-5873196 +86-773-20350599

Fax: +86-773-5822450

E-mail: woodpecker4@glwoodpecker.com

Website: www.glwoodpecker.com



MedNet GmbH
Borkstrasse 10-48163 Muenster-Germany

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG



Chi nhánh văn phòng TP. HCM

Địa chỉ: 13D Phan Chu Trinh, Phường Gia Định, TP. HCM

Hotline: 028 3911 2170

Chi nhánh văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Số 4 Ngõ 102 Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

Hotline: 024 3773 3138

Website: www.nhakhoathaibinhduong.com