

COMPOSITE LỎNG PALFIQUE UNIVERSAL FLOW


VẬT LIỆU GỐC RESIN TRONG PHỤC HỒI NHA KHOA




Thẩm mỹ tuyệt vời

Hòa hợp màu tự nhiên với dải phối màu rộng

PALFIQUE UNIVERSAL FLOW trên nền tảng được thiết kế để giúp cho hầu hết các trường hợp điều trị có thể được phục hồi bằng màu với giới hạn đơn sắc nhờ hiệu ứng phối màu/ hòa hợp màu tuyệt vời của nó.

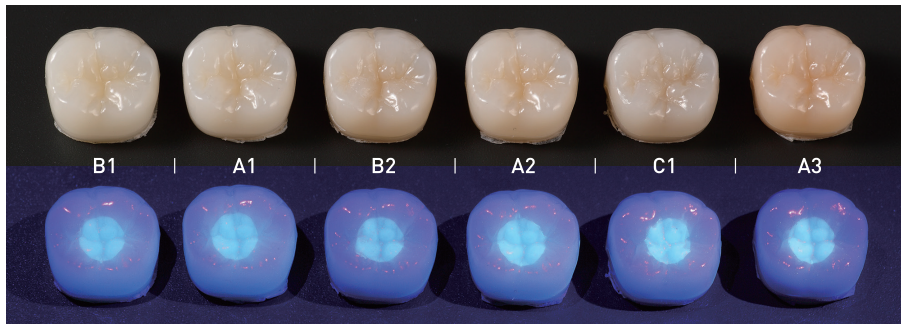


Độ tương thích màu sắc của PALFIQUE UNIVERSAL FLOW màu A2 khi được trám trên từng chiếc răng nhân tạo (B1, A1, B2, A2, C1, A3) sau khi tạo xoang có đường kính 4 mm và sâu 2 mm. Bằng cách sử dụng ánh sáng đen, chúng tôi có thể nhìn thấy độ huỳnh quang của PALFIQUE UNIVERSAL FLOW ở vị trí được trám.

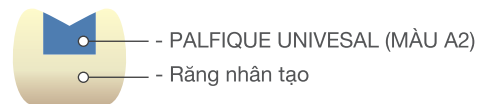


Độ khuếch tán ánh sáng cao

PALFIQUE UNIVERSAL FLOW có độ khuếch tán ánh sáng cao nhất bằng thử nghiệm truyền sáng bằng laser. Điều này có thể thấy trên lâm sàng giúp đạt được kết quả hòa hợp màu rộng và không nhìn thấy bờ miếng trám.

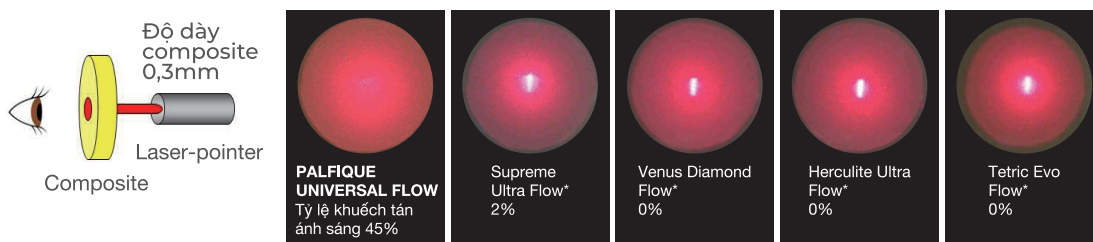


Thành phần hạt độ

Hạt độ hình cầu siêu nano (200nm, hạt độ silica-zirconia) và hạt độ composite hình tròn (bao gồm hạt độ hình cầu siêu nano) được sử dụng làm hạt độ của PALFIQUE UNIVERSAL FLOW. Việc sử dụng cả hai loại hạt độ sẽ góp phần tạo nên các đặc tính về thẩm mỹ (màu sắc đa dạng, khả năng đánh bóng tuyệt vời) và các đặc tính sử dụng (dễ tạo hình, không dính).

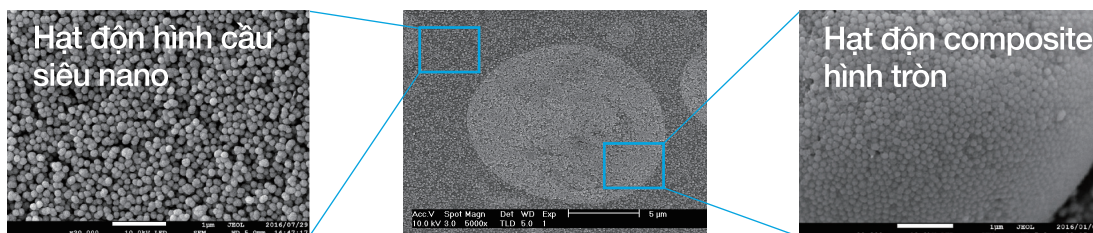


Khả năng đánh bóng

Độ bóng được đo bằng cách đánh bóng trong 60 giây với Sol-Lex™ Superfine.

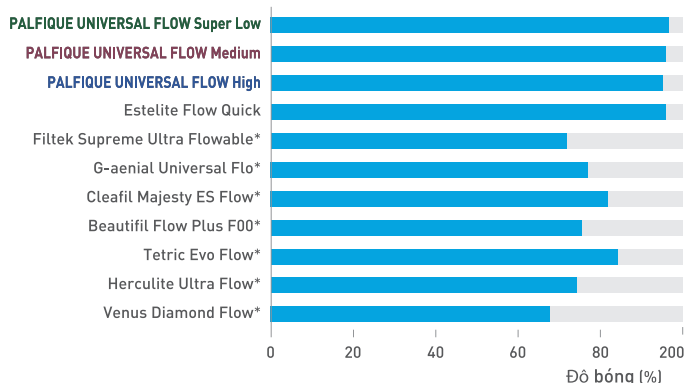

Duy trì độ bóng

Kiểm tra với chu kỳ nhiệt (5°C/55°C)

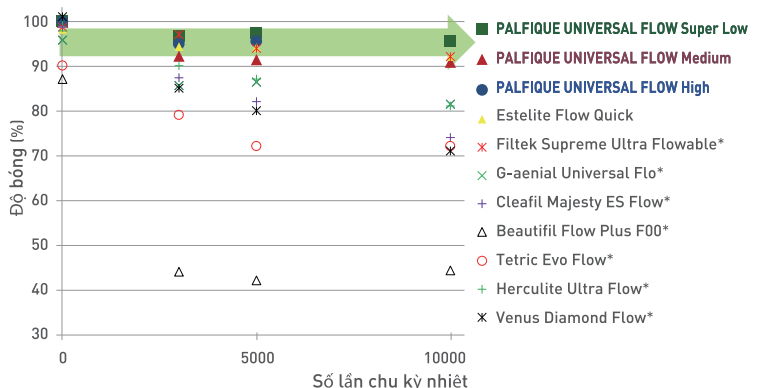

Ba tùy chọn với độ chảy và đặc tính để thao tác tuyệt vời

Độ chảy cực thấp (Super Low)



Có tính chảy lỏng




Loại xoang để nhét




Độ chảy trung bình



Có tính chảy lỏng

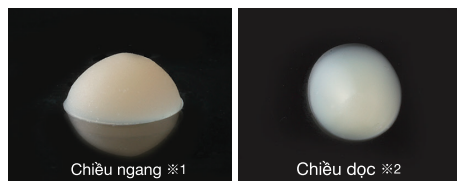


Loại xoang để nhét

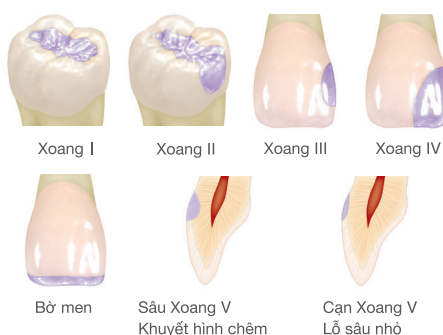


Độ chảy cao



Có tính chảy lỏng

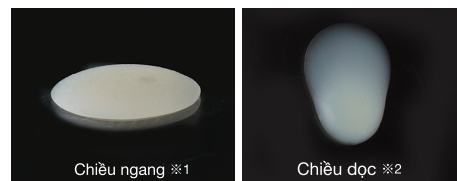

Loại xoang để nhét

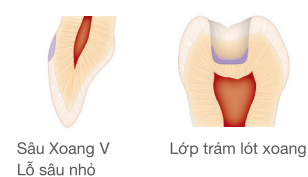

Dr.Miyazaki



Trước khi điều trị



Đặt vật liệu Palfique Universal Flow (Super Low A2)



Hình ảnh sau khi phục hồi

Dr.Tashiro



Trước khi điều trị



Đặt vật liệu Palfique Universal Flow (High OPA2 + Medium CE)



Hình ảnh sau khi phục hồi

Dr.Miyazaki



Trước khi điều trị




Đặt vật liệu Palfique Universal Flow (High OPA2 + Medium CE)




Hình ảnh sau khi phục hồi


6 màu

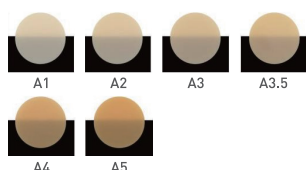


12 màu

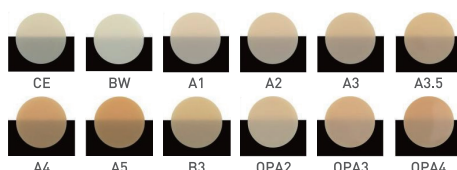


7 màu

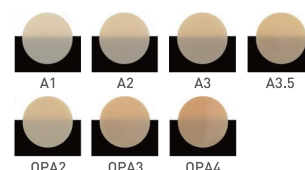


Đặc tính vật lý tuyệt vời

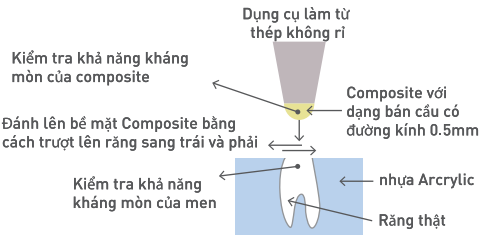

Độ bền uốn

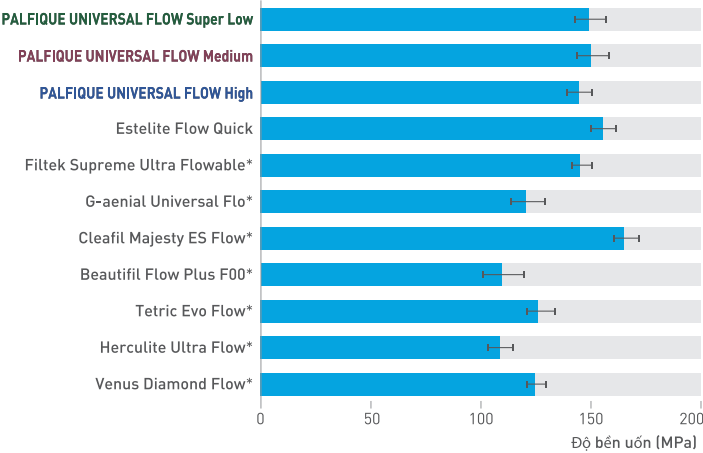

Độ kháng mòn

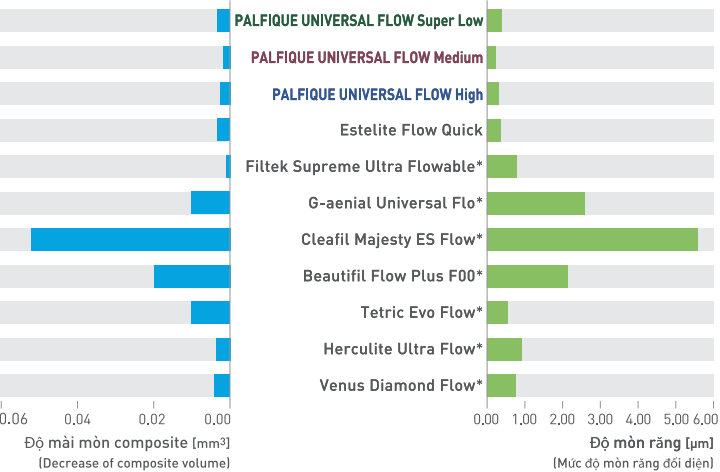

Các dòng sản phẩm

Composite lỏng PALFIQUE UNIVERSAL Flow - Vật liệu gốc resin trong phục hồi nha khoa -

*Không phải là thương hiệu đăng ký bởi Tập đoàn Nha Khoa Tokuyama

Ống lớn (L) – độ chảy cực thấp: Super Low
Bao gồm: 1 ống -1,8ml (3,0g), 10 đầu
Có 6 màu: A1,A2,A3,A3.5,A4,A5

Ống lớn (L) - độ chảy trung bình: Medium
Bao gồm: 1 ống -1,8ml (3,0g), 10 đầu
Ống nhỏ độ chảy trung bình: Medium
Bao gồm: 1 ống -1,0ml (1,7g), 6 đầu
Có 12 màu: CE,BW,A1,A2,A3,A3.5,A4,A5,B3.0PA2,0PA3,0PA4

Ống lớn (L)- độ chảy cao
Bao gồm: 1 ống -1,8ml (3,0g), 10 đầu
Có 7 màu: A1,A2,A3,A3.5,0PA2,0PA3,0PA4

Phụ kiện - Đầu bơm vật liệu TOKUYAMA/ Bao gồm: 50 đầu - Đầu TOKUYAMA bằng nhựa/ Bao gồm: 50 đầu - Bảng so màu cho PALFIQUE UNIVERSAL FLOW

Sản phẩm liên quan

PALFIQUE UNIVERSAL BOND - Keo dán nha khoa đa năng tự trùng hợp -



- Bộ**
- PALFIQUE UNIVERSAL BOND CHAI A/ 5mL X 1
 - PALFIQUE UNIVERSAL BOND CHAI B/ 5mL X 1
 - Cọ bôi dùng một lần (đầu nhỏ) X25
 - Khay trộn X1
 - Khay trộn dùng một lần X5



- Sản phẩm bán lẻ**
- PALFIQUE UNIVERSAL BOND CHAI A/ 5mL X 1
 - PALFIQUE UNIVERSAL BOND CHAI B/ 5mL X 1
 - Khay trộn dùng một lần X5