


ICX-TUBER


Ø4.1mm

Khái niệm **V-ON-ICX** mới.

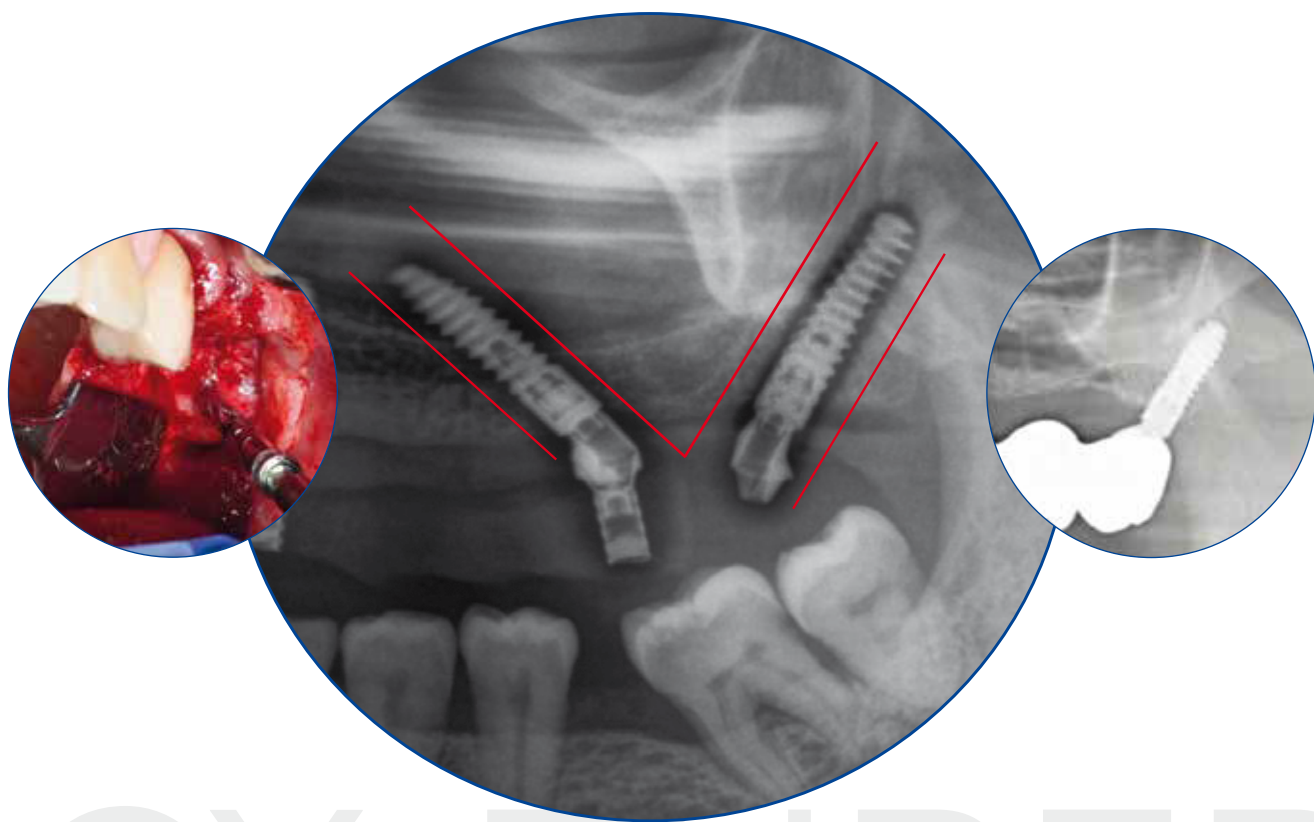

Các lợi ích của ICX-TUBER

- ➡ Tránh phẫu thuật nâng xoang và ghép xương.
- ➡ An toàn và tiên lượng dễ dàng hơn.
- ➡ Bệnh nhân hài lòng hơn.
- ➡ Linh hoạt hơn trong các lựa chọn phục hình

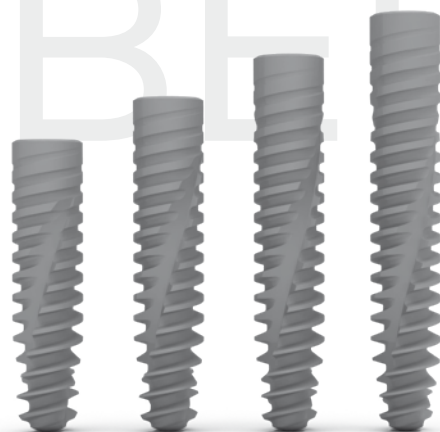

ĐỘ DÀI: 17.5 mm · 20.0mm · 22.5mm · 25.0mm


ICX-TUBER Ø 4.1mm

LỰA CHỌN THÔNG MINH, CHỌN ICX

medentis
medical

ICX-TUBER

Ø4.1mm

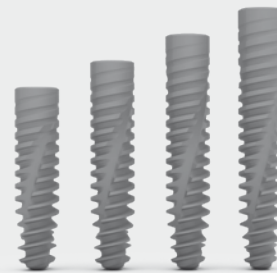

ĐỘ DÀI: 17.5 mm · 20.0mm · 22.5mm · 25.0mm

ICX-TUBER Ø 4.1mm

KHÁI NIỆM V-ON-ICX MỚI ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU ĐẶC THÙ CỦA CÁC BÁC SĨ NHA KHOA.

Việc cấy ghép implant ICX-TUBER là một phương án thay thế, tránh phải thực hiện nâng xoang hoặc các thủ thuật ghép xương khác khi điều trị vùng răng sau hàm trên hoặc các khoảng mất răng phía xa không có răng trụ nâng đỡ, áp dụng cho cả trường hợp mất răng bán phần và toàn bộ.

Implant ICX-TUBER mang đến cho các chuyên gia nha khoa sự linh hoạt cao trong việc lựa chọn vị trí đặt implant cũng như các giải pháp phục hình sau đó.

Thiết kế đặc biệt của implant này giúp mở rộng các lựa chọn điều trị. Bề mặt implant ICX được xử lý bằng etching axit ở nhiệt độ cao, tạo ra độ xoi mòn vi thể đặc trưng.

Cấu trúc bề mặt này là môi trường lý tưởng cho các tế bào xương bám vào.

Implant ICX-TUBER có phần ren được mở rộng ở vùng cổ implant để nén xương, thân implant có dạng hình nón và phần ren ở vùng chóp bên cạnh, kết hợp các rãnh giảm nén để dễ dàng hơn trong việc đặt hoặc tháo implant khi cần điều chỉnh vị trí.

Sự kết hợp thiết kế này có thể giúp rút ngắn thời gian lành thương và tối ưu hóa cho việc chịu lực sớm hoặc tức thì.

Độ ổn định ban đầu rất tốt

Tích hợp xương đáng tin cậy

Dành cho chỉ định phục hình tức thì

Thiết kế ICX cho vùng cổ (implant)

Ø 4,1

Ren có dạng mũi khoan xương đặc biệt

Ø 4,1

Độ xoi mòn vi thể lý tưởng (quan sát dưới độ phóng đại 13.000 lần)

Ren implant dạng nón ở vùng chóp giúp tối ưu hóa quá trình gắn implant vào xương.

LỰA CHỌN THÔNG MINH, CHỌN ICX

medentis
medical