

fläsh.

Hệ thống tẩy trắng răng tại nhà

Với máng tẩy dùng tại nhà

- Gel HOME WHITENING 3ml/ ống thuốc.
- AFTER WHITENING MOUSSE dùng cho giảm bớt ê buốt và hồi phục sau tẩy.
- Miếng làm máng tẩy trắng: **Bleaching foils.**
- **Light-curing Blocker:** được dùng tạo khoảng trên mẫu hàm bệnh nhân.

Nồng độ:

10 % CP (~ 3,5 % HP) dùng cho nguyên đêm.

16 % CP (~ 5,6 % HP) dùng cho nguyên đêm và dùng ban ngày.

22 % CP (~ 7,7 % HP) dùng cho tẩy ban ngày.

CP = Carbamid Peroxid
HP = Hydrogen Peroxide



*Đồng hành cùng nha sĩ trên toàn thế giới:
hệ thống tẩy trắng răng hiện đại nhất hiện nay*

- Kết quả hoàn hảo với độ trắng đồng nhất, độ trong tự nhiên.
- Hướng dẫn sử dụng luôn hiển thị trên máy với quy trình thực hiện dễ dàng, mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân.
- Quản lý thời gian công bằng với Fläshcard - đảm bảo bệnh nhân đang được sử dụng dịch vụ tẩy trắng cao cấp từ chính hãng.



CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

22-24 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM
Tel: 028 3911 2170 - Fax: 028 3911 2171

nhakhoathainhduong.com

fläsh.

Tẩy trắng răng,
chỉ có thể là trắng hơn.



Công nghệ mới của Flash
trên 20 năm kinh nghiệm về tẩy trắng răng

Flaesh.com



fläsh.

Đèn tẩy trắng

Cơ chế vận hành trực quan - An toàn trong điều trị

Công nghệ đèn LED công suất cao nhất với quang phổ ánh sáng tập trung cường độ cao cùng ánh sáng xanh có thể nhìn thấy. Tuổi thọ đèn LEDs rất cao với hơn 10,000 lần sử dụng. Vận hành an toàn nhờ vào hệ thống khóa đơn giản – cho phép dễ dàng định vị trước mặt bệnh nhân. Cài đặt chương trình đặc biệt cho răng nhạy cảm và tẩy trắng một răng. Cường độ ánh sáng có thể tùy chỉnh. Kết quả tối ưu với gel tẩy trắng tại ghế của Fläsh. Nhiệt độ tẩy trắng an toàn.

Hệ thống bao gồm:

- Đèn tẩy trắng Fläsh, với công nghệ đèn LED công suất cao, ánh sáng quang phổ 465 nM, 190 mW/cm², 100–240 V.
- Kính an toàn: 3 cái.
- Hệ thống đo thời gian bằng thẻ cho gel tẩy trắng Fläsh.



Định vị chính xác
với hệ thống khóa đơn giản
có thể điều chỉnh.


Đèn LEDs
công suất cao

Hệ thống
Fläshcard
Công nghệ mới


Màn hình màu cảm ứng hoàn toàn

3 chương trình tẩy trắng

Liên tục, ngắt quãng và tẩy răng đơn

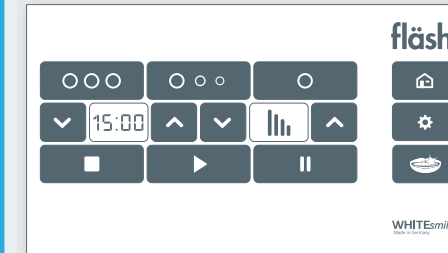

Hướng dẫn trực tiếp với hình ảnh trên thiết bị

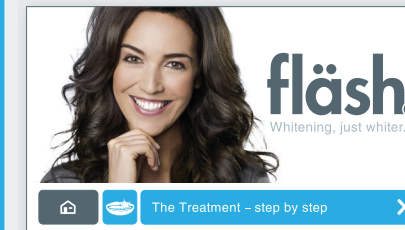

Xác định màu tẩy trắng đạt được.



Fläshcard

Hệ thống quản lý thời gian



Video

Quy trình điều trị theo từng bước
www.flash.com



fläsh.

Hệ thống tẩy trắng bằng đèn tại phòng nha

Với các chuyên gia phát triển hàng đầu - cho kết quả hoàn hảo

Tẩy trắng bằng đèn tại ghế Fläsh với 32 % Hydrogen Peroxide với Chlorophyll kích hoạt giúp cho việc tẩy trắng tại ghế với sự hỗ trợ của đèn đạt hiệu quả tối ưu. Tẩy trắng răng hiệu quả, thực hiện 3 lần x 15 phút trong mỗi ca tẩy trắng. Nhẹ nhàng với độ nhạy cảm rất thấp.

Cho kết quả tối ưu khi kết hợp sử dụng đèn tẩy trắng Fläsh Whitening. Việc điều trị tẩy trắng có thể tăng cường bằng cách sử dụng tẩy trắng tại nhà - Fläsh Take Home.

- Vật liệu dùng cho mỗi bệnh nhân trong bộ 2 bệnh nhân LIGHT WHITENING AC Ống thuốc dạng gel 4g - hai ống đôi dùng cho 3 - 4 lần.
- GINGIVA PROTECTOR: ống bảo vệ nướu 1,5g - quang trùng hợp.
- AFTER WHITENING MOUSSE: dùng chống ê buốt và hồi phục sau tẩy.
- Dầu vitamin E bảo vệ môi và tránh cho thuốc làm kích thích lên mô mềm.
- Biểu đồ thời gian - Đếm thời gian bằng phút chính xác, 60 phút trên mỗi ống thuốc dạng gel, tẩy trắng răng đơn thì không tính thời gian.
- Dụng cụ banh môi của Fläsh, có thể hấp tiệt trùng.
- Kem đánh răng Fläsh Whitening, 75ml, hương chanh bạc hà.
- Thuốc tẩy trắng răng HP 32 %, chỉ được sử dụng trong y khoa

CE 0123



Gel xanh giúp đặt thuốc chính xác



Dễ dàng định vị đèn chính xác
trên dụng cụ banh môi



Dụng cụ banh môi đàn hồi
dễ dàng đưa vào miệng bệnh nhân.